

СПЕЦИАЛНИ ИНДИКАЦИИ

 - Индикация за изхабени батерии.

 - Появява се, когато теглото е настроено на 0 гр. Преди повторно включване.

 - Тежестта е над 20 кг. Не преминавайте тази максимална граница.

 - Появява се, когато преди употреба на теглилната върху ваничката се постави тежест от над 4000 гр.

 - (отрицателна стойност) Появява се, когато след включване свалите тежестта от теглилната или част от нея или когато теглилната се допира до друг предмет, който пречи на нормалното функциониране на уреда. Поставете отново на 0, натиснете копчето on/function.

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията на теглилките TEFAL е до две години от датата на покупката. Гаранцията не важи при повреди, причинени от неправилна употреба и в случай, че везната е разглобявана. В случай, че теглилната не работи, моля, обърнете се къмоторизиран сервис.

TEFAL си запазва правото да прави промени в продукта, които са в интерес на потребителя.

TEFAL®

Упътване за употреба


**Електронна теглилка
за бебета и деца
79155**

БГ Сервиз
София, ул. Вежен 25
тел.: 02/ 963 22 49
02/ 865 01 55

София, ж.к. Люлин 10, бл. 149
тел.: 080011003

www.tefal.bg


ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

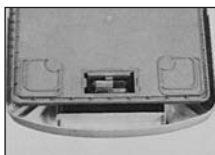

Отворете капачето на отвора за батерии, който се намира под теглилната и поставете нова алкална батерия от типа 6LR 61 (Спазвайте срока на годност на батериите). Затворете капачето.

Не извърляйте батериите с останалия домакински боклук! 

ПОСТАВЯНЕ НА ВАНИЧКАТА

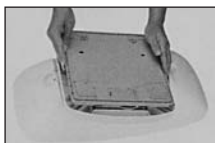

Обърнете ваничката и основата. Центрирайте основата докато автоматично се прикрепи към ваничката. Обърнете теглилната. Уредът е готов за употреба.

УПОТРЕБА



Поставете теглилната на равна и стабилна повърхност. Тя не трябва да се допира до други предмети. Натиснете копче on/function, в началото индикаторът показва  и едва след това 0 g. Ако поставите върху ваничката кърпа или друга подложка, натиснете копче on/function (преди да чуете сигнала), за да се покаже отново индикацията 0 g. Поставете бебето във ваничката. Когато чуете сигнала на дисплея в продължение на около 1 мин. и 30 сек. стои окончателното тегло в грама.

ПРОМЕНИ В ТЕГЛОТО



(Тази функция е подходяща за деца, които са над 2 кг.)

Редовно мерете теглото на детето, тъй като индикаторът за разликата в теглото е ограничен до максимум 1 кг. В сравнение с последното тегло. Когато се появи окончателното тегло: натиснете отново копче on/function - разликата в теглото се показва мигайки след няколко секунди и след това изчезва.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

Уредът се изключва автоматично:

- След като дисплеят в продължение на 1 мин. и 30 сек. непрекъснато е показвал теглото.
- След като уредът не е използван по-дълго от 2 мин.
- Няколко секунди след като на дисплея се е появила разликата в теглото.

ДЕТСКА ТЕГЛИЛКА



(Претегляне на стоящо дете върху основата на теглилната)

Обърнете теглилната обратно. С едната ръка откачете ваничката за бебета като с другата ръка държите здраво уреда. За включване и претегляне виж точка 3.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Не поставяйте теглилната в близост до източници на топлина.
- Употребата на уреда като микровълнови печки или безжични телефони в близост до теглилната може да доведе до грешна индикация на теглото.
- Почиствайте теглилната само с влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати. Не потапяйте уреда във вода.
- При прибиране на теглилната внимавайте: тя трябва да бъде изключена. Не поставяйте предмети върху уреда.